

# FAST FOCUS FINE TUNED



**avanti**<sup>®</sup>

MONTHLY DISPOSABLE SOFT CONTACT LENSES

ultravision<sup>cu</sup>

---

**NEVER MISS THE ACTION.**

**KLARE, SCHARFE SICHT IN JEDEM MOMENT.**

---

Vertrieb ☎ 02236/96229-0 info@bachoptic.de • www.bachoptic.de

 **Bach Optic**

  
avanti®

MONTHLY DISPOSABLE SOFT CONTACT LENSES

FAST  
FOCUS  
FINE  
TUNED



---

**SCHNELLE STABILISIERUNG FÜR  
KLARE SICHT IN JEDEM MOMENT.**

---

Das einzigartige Avanti® Linsendesign stabilisiert extrem schnell und sichert damit eine durchgehend scharfe und klare Sicht. Schnelle Blickrichtungswechsel und Kopfbewegungen sind kein Problem mehr.

Avanti® ist mit der Nähe oder Ferne im Zentrum erhältlich. Das flexible Multifokalsystem kombiniert die Nähe/Ferne im Zentrum mit weiteren Optionen, um den Visus für das dominante Auge zu optimieren.


Mit der hervorragenden Avanti® Stabilisierung und den umfangreichen Anpassoptionen erhalten Ihre Kunden jederzeit eine optimale Sicht.

## DER KOMFORT EINER WEICHEN MONATSLINSE GEPAART MIT INDIVIDUELLER FERTIGUNG.

### FREEFORM STABILISATION

Die Avanti® Stabilisierung arbeitet mit speziellen Randzonen, die mit den Ober- und Unterlidern interagieren. Die Stabilisierung erfolgt meist innerhalb von 20 Sekunden.


### HERKÖMMLICHE STABILISATION

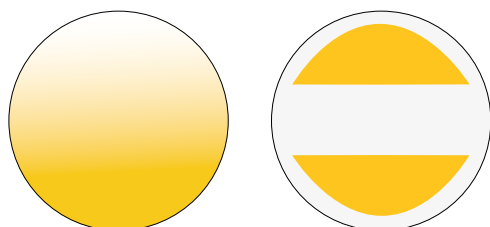

PRISMATISCHE  
STABILISATION

DYNAMISCHE  
STABILISATION

### FREEFORM

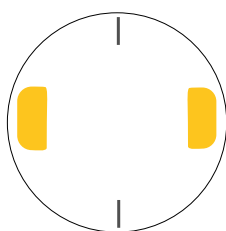

AVANTI®  
STABILISATION

Avanti® Linsen haben zwei Lasermarkierungen, auch bei sphärischem Design. Das unterstützt die visuelle Stabilität, vor allem bei Multifokallinsen.

### DIE VORTEILE

- Sehr großer Parameterbereich
- Stabiler Visus bei allen Augenbewegungen
- Verdreht nicht während des Tragens
- Stabilisiert bei geneigter Kopfhaltung
- Dünnes Linsendesign
- Erhöhter Tragekomfort

### MULTIFOKALE OPTIONEN

Avanti® kann mit der Nähe oder Ferne im Zentrum bestellt werden. Eine Zusatzoption verbessert den Visus für das dominante Auge. Auf Basis Ihrer Informationen wird die beste Kombination ermittelt.



# NEVER MISS THE ACTION.

## KLARE, SCHARFE SICHT IN JEDEM MOMENT.



### LIEFERBEREICH

Basiskurve	8.00 8.30 8.60 8.90 9.20 mm
Durchmesser	14.00 14.50 15.00 mm
Stärke	+/- 20.00 dpt
Zylinder	-0.75 bis -8.00 dpt
Achse	1°- 180° (1° Abst.)
Multifokal	Ferne oder Nähe im Zentrum
Addition	+0.50 bis +4.00 dpt

### MATERIAL

Definitive 74 % SiH (Handlingstint: Blau)  
Dk 60  
UV- Schutz (Klasse 2)

### EINFACHE BESTELLUNG

Sie geben uns – telefonisch oder per E-Mail – bitte folgende Informationen:

- HSA
- HH-Radien und HH-Durchmesser
- Pupillen-Durchmesser (bei Tageslicht)
- Brillenrefraktion
- Dominantes Auge
- Priorität der Sehanforderung (Siehe Tabelle)

Optimiert für ...	Sehpriorität	Dominantes Auge	Nicht-domin. Auge
Ferne & Zwischenbereich	wenig Nähe	CD* Dom. Option	CD Dom. Option
Ferne & Zwischenbereich	moderate Nähe	CD Dom. Option	CD Standard
Ferne & Zwischenbereich	viel Nähe	CD Dom. Option	CN* Standard
Nähe	wenig Ferne	CN Dom. Option	CN Dom. Option
Nähe & Zwischenbereich	moderate Ferne	CN Dom. Option	CN Standard
Nähe & Zwischenbereich	viel Ferne	CN Dom. Option	CD Standard

\*CN (Centre Near) = Nähe im Zentrum \*CD (Centre Distance) = Ferne im Zentrum

### Anpassberatung und Bestellannahme

 **02236/96229-0 (Fax -29)**

info@bachoptic.de www.bachoptic.de

Bach Optic GH-GmbH • Emil-Hoffmann-Str. 55-59 • 50996 Köln

 **Bach Optic**  
Kontaktlinsen • Pflegemittel • Services